




BRUKSANVISNING RÖRELSEVAKT



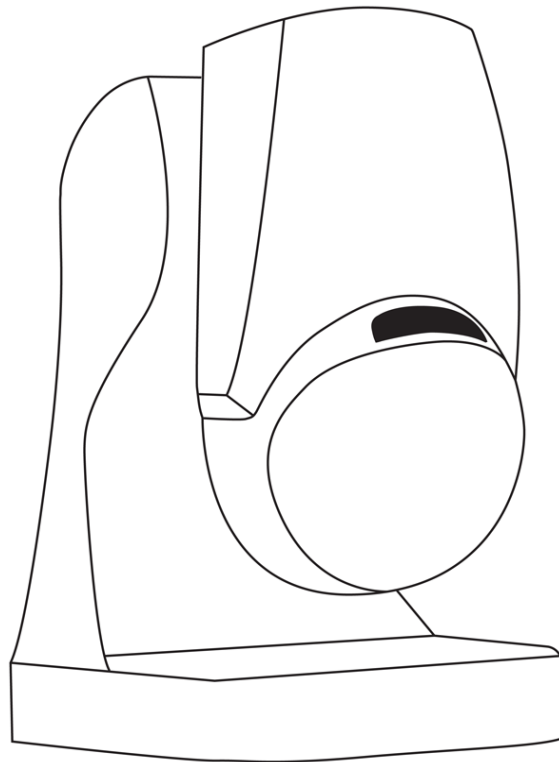

Innehåll

Rörelsevaktens funktion	3
Koppla bort treminutersfördröjningen	3
Komma igång (batteribyte)	4
Placering av rörelsevakten.	6
Placeringstips	7
Säng	7
Dörr	7
Hund	8
Test av bevakningsområde.....	8
Inkopplingsmöjligheter	9



Rörelsevaktens funktion

Rörelsevakten har en inbyggd sändare som skall kopplas mot en mottagare, se även mottagarens bruksanvisning (koppla sändare, aktivera sändare).


Rörelsevakten reagerar på värme som rör sig t.ex människa eller djur. I bruksanvisningen kommer vi att ge er tips och råd om hur ni skall placera larmet.

Rörelsevakten har ett batteri med en livslängd på ca 1-2 år. Vid batteribyte och installation måste larmet öppnas.

Rörelsevakten fungerar så att den larmar direkt vid rörelse. Sedan är den inaktiv i ca tre minuter. Om det fortfarande är rörelse framför den efter den tiden kommer det att gå ett nytt larm.

Koppla bort treminutersfördröjningen

För testläge se s 12. Önskas ingen fördröjning flytta bygeln som sitter på JS2 på kretskortet till mittenparet av de 6 benen som visas i bilden nedan. Nu larmar den med 10-15 sek intervall. (Förkortar batteriets livslängd). Efter justering glöm ej bryta strömmen.

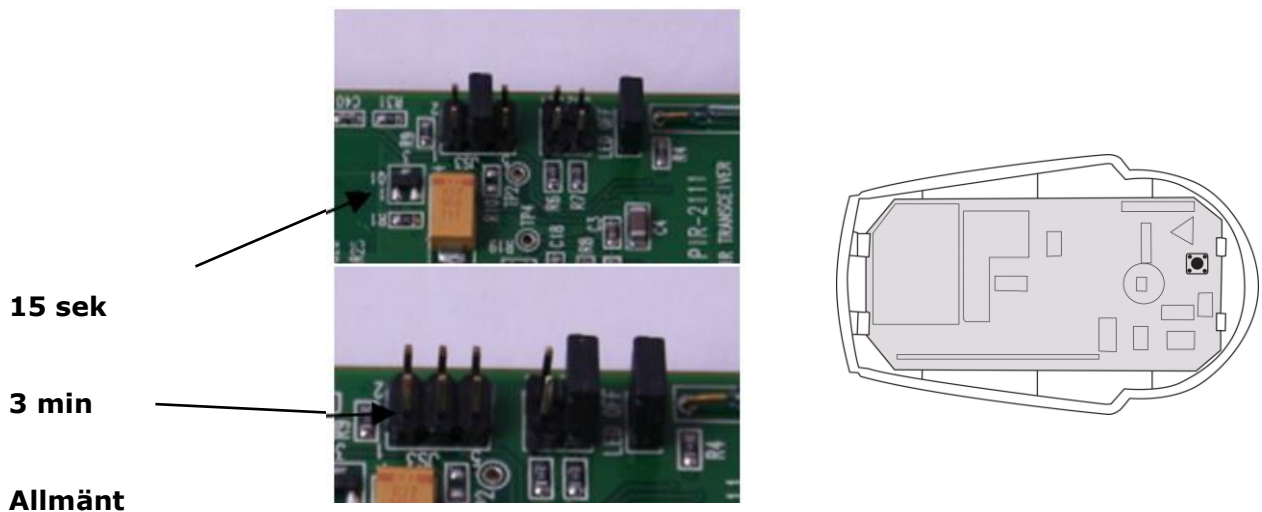

Rörelsevakten kan endast kopplas till mottagare levererade av Zafe Care Systems AB eller Neat Electronics AB.


Rörelsevakten har ingen på/av funktion så om larmet skall vara inaktivt under dagen kan antingen mottagaren stängas av eller rikta rörelsevakten mot väggen.

Komma igång (batteribyte)


Innan man kopplar larmet till en mottagare måste batteriet sättas i. (Detta är oftast gjort när rörelsevakten levereras till dig.)


Du behöver en liten stjärnskruvmejsel och en liten vanlig skruvmejsel.

1. Lossa stora vingmuttern bak på foten.
2. Vrid upp sensorn så ni kan avlägsna lilla skruven i botten (figur 1, sid 6).
3. Bredvid skruven finns ett litet rektangulärt hål. Tryck ned en skruvmejsel i hålet och lyft av höljet.
4. Lägg rörelsevakten på rygg
5. Lyft ur kretskortet genom att trycka på plast klackarna, se bild nedan.

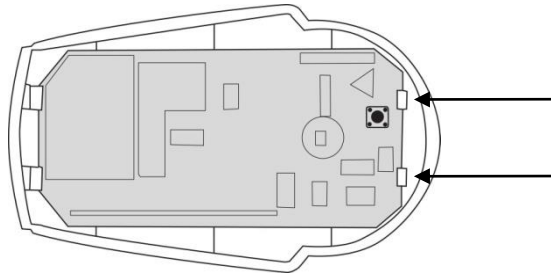

6. På baksidan av kretskortet ska batteriet sitta (alt. byt batteri).
7. Sätt tillbaka kretskortet. Se till att kretskortet sitter fast.
8. För att koppla ihop sändare och mottagare behöver du en mottagare och mottagarens bruksanvisning. Mottagaren kan även vara en trygghetstelefon, se sidan 14.
9. Följ mottagarens bruksanvisning för att koppla sändare.
10. Aktivera rörelsevaktens sändare genom att trycka på knappen på kretskortet, se bild nedan, eller aktivera med magnet, se testläge sidan 12.
11. Avsluta programmeringen av mottagaren (se bruksanvisning mottagaren).
12. Sätt på höljet och skruva i skruven.
13. Vrid tillbaka sensorn, spänn åter vingmuttern försiktigt.

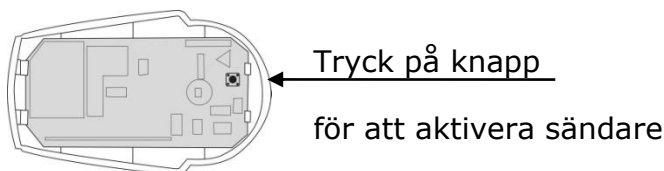

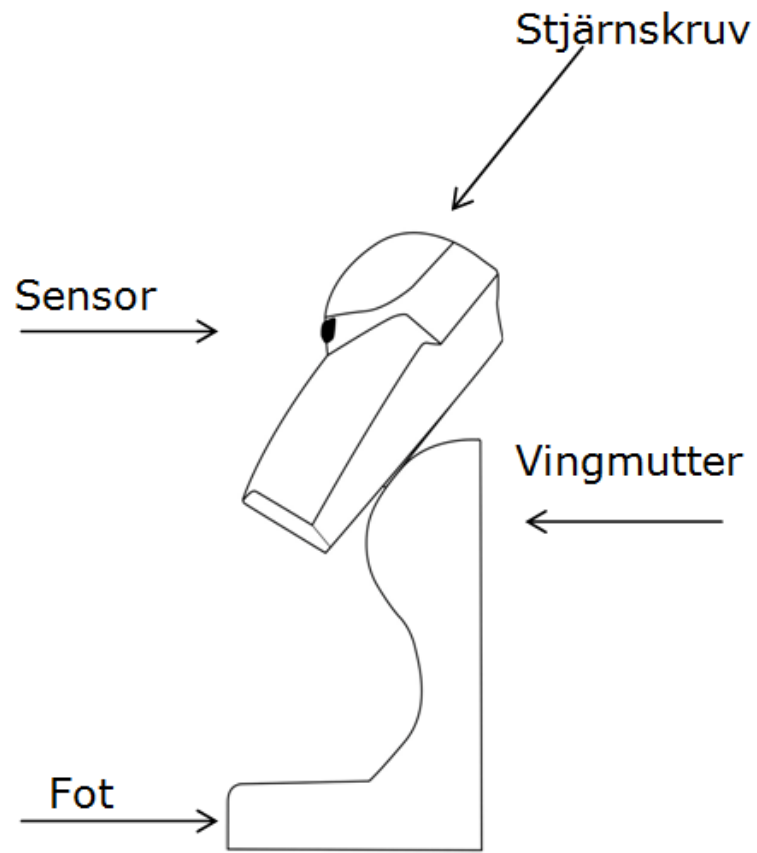

Figur 1.

Placering av rörelsevakten.

Justera in rörelsevaktens sensorhuvud så att önskat bevakningsområde täcks.

Sensorhuvudet är både vrid- och skjutbart för att ge olika inställningsmöjligheter.

Figur 2 och 3 visar sensorns vanligaste bevakningsområde.

Undvik att rikta rörelsevakten mot värmekälla såsom element eller liknande då rörelsevakten kan skicka ut falsklarm.

Rikta inte heller direkt mot fönster.

Tänk på att husdjur kan utlösa larmet.

Bevakningsområdet är smalt och har en lång räckvidd på 8-10 meter.

Lossa vingmuttern på fotens baksida och placera sensorn så att önskat bevakningsområde täcks.

Placeringstips finns på sidan 6, 7 & 8.



Figur 2.



Figur 3.

Rörelsevakt sedd uppifrån tar rörelse upp till 8-10meter, smalt . Sätter man "huvudet" vågrätt så tar den rörelse på bredden istället som figur 3, sid 6.


Placeringstips

Säng

Beroende på hur man vrider sensorn, kan man få ett exakt och bra bevakningsområde.

Placerar man rörelsevakten vid t.ex. huvudändan av sängen och riktar den som figur 2, kommer man att få larm så fort personen har fötterna utanför sängen.

Placerar man rörelsevakten som figur 3, kan man placera den under sängen och få ett brett fält så det larmar oavsett var man sätter ner fötterna nedanför sängstommen.

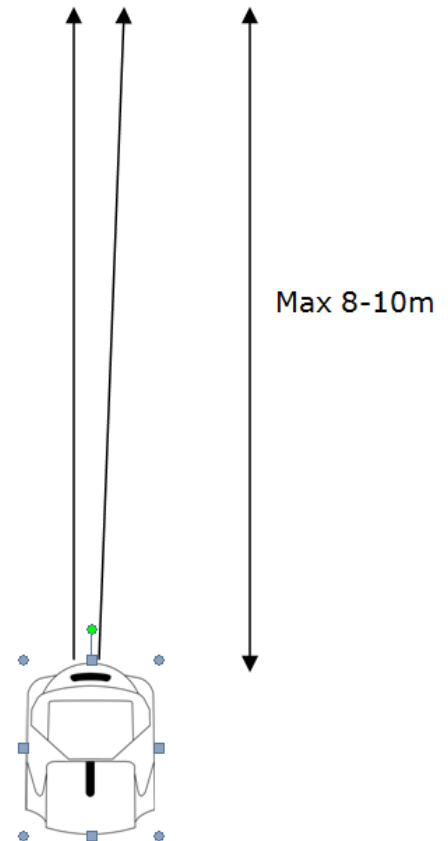

Dörr

För att bevaka utpassage, ställ rörelsevakten på golvet med sensorn placerad parallellt med väggen förbi dörröppningen. Med stjärnskruv ner mot foten



Hund


Placera rörelsevakten i en bokhylla eller på byrå. Rikta rörelsevakten som i figur 2 sidan 8 fast i/på en byrå istället för på golvet. (med sensor och stjärnskruv ner mot foten) för att bevaka ett område som är lite högre. Detta gör att en hund kan gå under bevakningsområdet.

Test av bevakningsområde

För att prova bevakningsområdet behövs en stark magnet. Håll magneten på högra sidan av vaktens lins, se figur 4, tills den röda lysdioden ovanför linsen tänds. Treminuters-fördröjningen kopplas nu bort.

Ta bort magneten, vänta fem sekunder och gå sedan in i området. Lysdioden tänds när vakten registrerat din rörelse. Gå nu ut ur området, vänta fem sekunder och gå in igen. Lampan tänds åter.

Vill du att treminuters-fördröjningen ska aktiveras, vänta i 60 sekunder innan du går in i området igen.

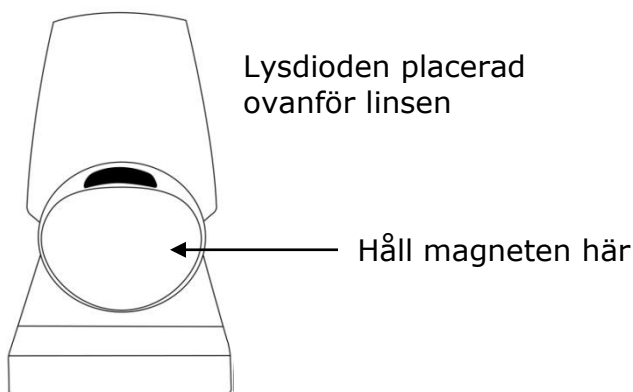

Figur 4



Inkopplingsmöjligheter

Bärbar mottagare - TREX
och HOME



Fast mottagare - LINK och IOR



Trygghetstelefon -
NEO

ZAFE Care Systems AB
Industrigatan 2
291 36 KRISTIANSTAD
Tel. 010 - 209 62 20